

प्रयोग गर्ने तरिका

तपाईंको पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, एक-एक चरण गरेर।

खल्लीमा अट्ने सानो, रिचार्ज गर्न मिल्ने नेबुलाइजर। यसले झोल औषधिलाई मसिनो कुहिरोमा बदल्छ। तपाईं त्यो कुहिरो मास्क वा माउथपिसबाट सास फेर्दै भित्र लिनुहुन्छ। यो बच्चाहरूको मोडेल र वयस्कहरूको मोडेलमा आउँछ, र दुवैले अलि फरक तरिकाले काम गर्छन्। त्यसैले तल आफ्नो मोडेल छान्नुहोस्।

केही प्रश्न छ? सोमबारदेखि शुक्रबार, New York को समयअनुसार बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हामीलाई **(718) 351-3045** मा फोन गर्नुहोस्।



अहिले नै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ? 911 मा फोन गर्नुहोस्। सास फेर्न धेरै गाह्रो भयो, तपाईं वा तपाईंको बच्चाको पूरा वाक्य बोल्न सकेन, वा ओठ वा नङ नीलो वा खरानी रङको देखियो भने 911 मा फोन गर्नुहोस्। उपचार सकिने कुरा नपर्छनुहोस्।

पहिले हेर्नुहोस्

यसलाई जोडेको र चलेको हेर्नुहोस्।

भिडियोले पोर्टेबल नेबुलाइजरलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म देखाउँछ। हरेक चरण तल पनि लेखिएको छ। तपाईं यसको प्रति आफ्नो फोनमा राख्न वा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।


भिडियो अङ्ग्रेजीमा छ।

भिडियो: <https://www.youtube.com/watch?v=QypMcxyrtig>

बाकसभित्र के-के छ

तपाईंसँग सबै कुरा छ कि छैन जाँच्नुहोस्।

- ✓ नेबुलाइजर, यसको औषधिको कप र कुहिरोको निकास छोप्रे क्यापसहित
- ✓ वयस्कको मास्क (ठूलो)
- ✓ बच्चाको मास्क (सानो)
- ✓ माउथपिस
- ✓ USB चार्जिङ केबल (USB-A देखि USB-C)
- ✓ निर्देशन पुस्तिका

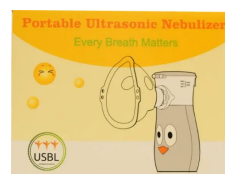

बच्चाहरूको मोडेलको बाकस।



वयस्कहरूको मोडेलको बाकस।



बच्चाहरूको बाकसको छेउ: वयस्कको मास्क, बच्चाको मास्क र माउथपिस।



एक-एक चरण गरेर

बच्चाहरूको मोडेल

नीलो, हरियो, सुन्तला रङ वा सेतो, कार्टुन अनुहार भएको। सुन्तला रङको चुच्चो नै अन/अफ बटन हो।

पार्टपुर्जा चिन्तुहोस्

- 1 औषधिको कप, माथितिर उघिने बिकोसहित; यसमा 10 ml सम्म औषधि अट्छ
- 2 अगाडि कुहिरोको निकास, जहाँ मास्क वा माउथपिस लाग्छ; प्रयोग नगर्दा क्यापले यसलाई छोप्छ
- 3 अन/अफ बटन: अगाडिको सुन्तला रङको चुच्चो
- 4 अगाडिको बत्ती: यसले चार्जिङ, सफा गर्ने मोड, र यन्त्र चलिरहेको देखाउँछ
- 5 पछाडि कप निकाल्ने बटन
- 6 पछाडि USB-C चार्जिङ पोर्ट

चार्ज गर्ने

- 01 **प्लग लगाउनुहोस्**
केबलको USB-C भएको छेउ पछाडिको चार्जिङ पोर्टमा लगाउनुहोस्। USB-A भएको छेउ भित्ताको USB एडाप्टर वा कम्प्युटरमा लगाउनुहोस्।
- 02 **बत्ती हेर्नुहोस्**
चार्ज हुँदा बत्ती पहुँलो रहन्छ। ब्याट्री पूरा भरिएपछि बत्ती हरियो हुन्छ।
- 03 **आफ्नो ब्याट्रीबारे जान्नुहोस्**
15 मिनेट चार्ज गर्दा यो दुई घण्टासम्म चल्छ। नेबुलाइजर केही समय नचलाई राख्नुहुन्छ भने, ब्याट्री राम्रो राख्न कम्तीमा हरेक दुई महिनामा चार्ज गर्नुहोस्।

हरेक उपचार

- 01 **तयारी गर्नुहोस्**
हात धुनुहोस्। कप, मास्क र माउथपिस सफा र सुक्का छन् भनी हेर्नुहोस्। सीधा बस्नुहोस्।
- 02 **कप भर्नुहोस्**
बिको खोल्नुहोस् र डाक्टरले लेखिदिएको औषधि हाल्नुहोस्। 10 ml भन्दा बढी नभर्नुहोस्। खट्टा आवाज आउने गरी बिको बन्द गर्नुहोस्।
- 03 **मास्क वा माउथपिस लगाउनुहोस्**
अगाडिको क्याप हटाउनुहोस्। मास्क वा माउथपिसलाई गोलो निकासमा थिचेर लगाउनुहोस्। शिशु र बच्चाहरूका लागि नाक र मुख दुवै छोप्ने मास्क प्रयोग गर्नुहोस्।
- 04 **अन गर्नुहोस् र स्पिड छान्नुहोस्**
अन/अफ बटन थिच्नुहोस्। तेज, मध्यम र ढिलो स्पिड बदल्न फेरि थिच्नुहोस्। लगातार निस्कने कुहिरो र नीलो बत्तीको अर्थ यो काम गरिरहेको छ।
- 05 **सामान्य रूपमा सास फेर्नुहोस्**
नेबुलाइजरलाई सीधा समात्नुहोस्। माउथपिसलाई मुखमा राखेर ओठले चारैतिर बन्द गर्नुहोस्, वा मास्कलाई नाक र मुखमा मिलाएर लगाउनुहोस्। बिस्तारै र सामान्य रूपमा सास फेर्नुहोस्।
- 06 **समय दिनुहोस्**
5 ml औषधिलाई तेज स्पिडमा करिब 15 मिनेट, मध्यममा 20 मिनेट, र ढिलोमा 30 मिनेट लाग्छ। 20 मिनेटपछि यो आफैँ बन्द हुन्छ। औषधि बाँकी छ भने, जारी राख्न बटन थिच्नुहोस्।

07

सिध्दाउनुहोस्

आवाज फेरिएपछि, वा कप खाली भएर यो बन्द भएपछि रोक्नुहोस्। कपमा केही थोपा बाँकी रहनु सामान्य हो।

बच्चालाई उपचार दिँदा

पूरे समय मास्कलाई अनुहारमा टाँसिने गरी राख्नुहोस्। मास्क अनुहारबाट अलिकति मात्र टाढा भए पनि धेरै औषधि फोक्सोसम्म पुग्नुअघि नै बाहिर उम्किन्छ। रोइरहेको बच्चाले पनि कम औषधि सासमा लिन्छ। त्यसैले शान्त समय, मनपर्ने कार्यक्रम वा कुनै किताबले साँच्चै धेरै मद्दत गर्छ।

सुझावहरू

- औषधि कुहिरो प्लेटमै रहोस् भनेर पूरे समय यसलाई सीधा राख्नुहोस्।
- डाक्टरले लेखिदिएको झोल औषधि वा सलाइन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सादा पानी, तेल, दूध वा बाक्लो झोल कहिल्यै नहाल्नुहोस्।
- बच्चाले यो कुनै वयस्कको निगरानीमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बच्चालाई यसको साथ कहिल्यै एकलै नछोड्नुहोस्।

सफा गर्ने, हरेक उपचारपछि

01

कप खाली गर्नुहोस्

कपमा बाँकी रहेको औषधि प्याँक्नुहोस्।

02

आवश्यक परे कप निकाल्नुहोस्

पछाडिको कप निकाल्ने बटन थिच्नुहोस् र कपलाई अगाडितिर धकेलेर निकाल्नुहोस्। फेरि लगाउन, क्लिक आवाज नआउन्जेल यसलाई धकेल्नुहोस्।

03

मास्क र माउथपिस सफा गर्नुहोस्

यिनलाई निकाल्नुहोस्। त्यसपछि मेडिकल अल्कोहल वाइपले पुछ्नुहोस्, वा किटाणुरहित पार्न भिजाएर राख्नुहोस्। मनतातो पानीले पखाल्नुहोस् र हावामा सुक्न दिनुहोस्।

04

आफैं सफा गर्ने मोड चलाउनुहोस्

कपमा करिब 6 ml सफा पानी हाल्नुहोस् र बिको बन्द गर्नुहोस्। अन/अफ बटनलाई करिब 5 सेकेन्ड थिचिराख्नुहोस्। सफा हुँदै गर्दा बत्ती हरियो र रातो झिम्किन्छ। यो कुहिरो सासमा नलिनुहोस्।

05

पुछ्नुहोस् र राख्नुहोस्

बाहिरपट्टि नरम, सुक्खा र सफा तौलियाले पुछ्नुहोस्। नेबुलाइजरलाई कहिल्यै पानीले नपखाल्नुहोस्, पानीमा पनि नडुबाउनुहोस्। क्याप फेरि लगाउनुहोस् र चिसो, सुक्खा ठाउँमा राख्नुहोस्।

कृपया यी कुरा नगर्नुहोस्

- निकासभित्रको धातुको सानो कुहिरो प्लेटलाई ओँला, ब्रस वा कुनै कडा चीजले कहिल्यै नछुनुहोस्।
- खाली कपमा यसलाई कहिल्यै नचलाउनुहोस्।
- यसलाई कहिल्यै तातो सतहमा नराख्नुहोस्।

केही चलेन भने**धेरै कम कुहिरो, वा कुहिरो नै छैन**

- औषधि थप्नुहोस्; कपमा पर्याप्त औषधि नहुन सक्छ।
- नेबुलाइजरलाई सीधा समात्नुहोस्।
- धेरै बाक्लो औषधिबाट कुहिरो नबन्न सक्छ। आफ्नो फार्मासिस्टलाई सोध्नुहोस्।

प्राविधिक विवरण

तौल	करिब 100 ग्राम (3.5 औंस)
आकार	118 मिमि अग्लो, 39.5 मिमि चौडा (करिब 4.6 × 1.6 इन्च)
औषधिको कप	10 ml सम्म

- चिसो कोठामा, 3 देखि 6 ml तातो पानी हालेर त्यो नसकिउन्जेल चलाउनुहोस् (यो सासमा नलिनुहोस्)। त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।

कुहिरो कमजोर छ

- ब्याट्री चार्ज गर्नुहोस्।
- हावाका फोकाहरू हटाउन कपलाई हल्का ठोक्नुहोस् वा बिस्तारै हल्लाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि अन गर्नुहोस्।
- कुहिरो प्लेट सफा गर्नुहोस्: 3 देखि 6 ml पानीमा 2 वा 3 थोपा सिरका हालेर त्यो नसकिउन्जेल चलाउनुहोस् (यो सासमा नलिनुहोस्)। त्यसपछि कप सफा गर्नुहोस्।
- यीमध्ये कुनैले पनि काम गरेन भने, कुहिरो प्लेट खिइएको हुन सक्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्।

कपमा औषधि छ, तर कुहिरो निस्कँदैन

- औषधि हाल्दा हावाका फोकाको कुहिरो प्लेट छेक्न सक्छन्। कपलाई हल्का ठोक्नुहोस् वा बिस्तारै हल्लाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि अन गर्नुहोस्।

अन्त्यमा अलिकति औषधि बाँकी रहन्छ

- यो सामान्य हो। आवाज फेरिएपछि वा यो आफैँ बन्द भएपछि रोक्नुहोस्।

कुहिरो बन्ने दर	प्रति मिनेट करिब 0.2 ml
कणको आकार	5 माइक्रोन वा त्योभन्दा सानो
आवाज	50 dB वा त्योभन्दा कम
ब्याट्री	भित्रै जडान गरिएको लिथियम ब्याट्री; 15 मिनेट चार्ज गर्दा 2 घण्टासम्म प्रयोग
चार्जिङ	USB-A देखि USB-C केबल, 5 V / 1 A
आफैँ बन्द हुने समय	20 मिनेट
प्रयोग गर्ने तापक्रम	5 °C देखि 40 °C (41 °F देखि 104 °F) सम्म



एक-एक चरण गरेर

वयस्कहरूको मोडेल

सुन्तला रडको, गोलो सेतो पावर बटन र त्यसको माथि सानो बत्ती भएको।

पार्टपुर्जा चिन्तुहोस्

- 1 औषधिको कप, पल्टाएर खोलिने बिकोर्सहित; यसमा करिब 10 ml औषधि अट्छ
- 2 अगाडि कुहिरोको निकास, जहाँ मास्क वा माउथपिस लाग्छ; प्रयोग नगर्दा क्यापले यसलाई छोप्छ
- 3 गोलो पावर बटन
- 4 बटनमाथिको बत्ती: यसले स्पिड, चार्जिङ र कम ब्याट्री देखाउँछ
- 5 पछाडि PUSH लेखिएको कप निकाल्ने बटन
- 6 पछाडि USB-C चार्जिङ पोर्ट, रबरको सानो ढकनीपछाडि

चार्ज गर्ने

- 01 **प्लग लगाउनुहोस्**
पछाडिको रबरको ढकनी खोल्नुहोस् र केबलको USB-C भएको छेउ लगाउनुहोस्। USB-A भएको छेउ भित्ताको USB एडाप्टर वा कम्प्युटरमा लगाउनुहोस्।
- 02 **बत्ती हेर्नुहोस्**
चार्ज हुँदा बत्ती पहेँलो हुन्छ। पूरा भरिएपछि बत्ती लगातार हरियो बल्छ।
- 03 **पूरा भरिएपछि प्लग निकाल्नुहोस्**
केबल निकाल्नुहोस् र रबरको ढकनी बन्द गर्नुहोस्। चार्ज हुँदै गर्दा नेबुलाइजर चल्दैन।
- 04 **आफ्नो ब्याट्रीबारे जान्नुहोस्**
15 मिनेट चार्ज गर्दा यो दुई घण्टासम्म चल्छ। पहेँलो बत्ती झिम्किँदै छ भने ब्याट्री कम छ। केही समय नचलाई राख्नुहुन्छ भने, कम्तीमा हरेक तीन महिनामा चार्ज गर्नुहोस्।

हरेक उपचार

- 01 **तयारी गर्नुहोस्**
हात धुनुहोस्। कप, मास्क र माउथपिस सफा र सुक्खा छन् भनी हेर्नुहोस्।
- 02 **कप निकाल्नुहोस्**
पछाडिको PUSH बटन थिचिराख्नुहोस् र कपलाई अगाडितिर सारेर यन्त्रबाट निकाल्नुहोस्।
- 03 **औषधि हाल्नुहोस्**
कपको बिको खोल्नुहोस् र डाक्टरले लेखिदिएको औषधि हाल्नुहोस्: कम्तीमा 1 ml, र कपमा भएको रेखाभन्दा माथि होइन। बिको कसिलो गरी बन्द गर्नुहोस्।
- 04 **कप फेरि लगाउनुहोस्**
क्लिक आवाज नआउन्जेल कपलाई सारेर फेरि लगाउनुहोस्। कप र यन्त्रबीचका धातुका साना कन्ट्याक्टहरू सफा र सुक्खा हुनुपर्छ, नत्र यो अन नहुन सक्छ।
- 05 **मास्क वा माउथपिस लगाउनुहोस्**
अगाडिको क्याप हटाउनुहोस्। मास्क वा माउथपिसलाई गोलो निकासमा थिचेर लगाउनुहोस्।
- 06 **अन गर्नुहोस् र स्पिड छान्नुहोस्**
पावर बटन थिचिराख्नुहोस्; करिब 2 सेकेन्डमा कुहिरो निस्कन थाल्छ। बटनलाई हरेक पटक छोटो गरी थिच्दा स्पिड बदलिन्छ: हरियो भनेको ढिलो, नीलो भनेको मध्यम, पहेँलो भनेको तेज।

07

सामान्य रूपमा सास फेर्नुहोस्

यसलाई स्थिर समाबुहोस्, आराम गर्नुहोस् र सामान्य रूपमा सास फेर्नुहोस्। मास्कमा भएका हावा जाने प्वालहरू नछोप्नुहोस्।

08

सिध्याउनुहोस्

अन्त्यतिर, अन्तिम थोपाहरू कुहिरो प्लेटसम्म पुग्नु भनेर अगाडिको भाग अलिकति आफूतिर ढल्काउनुहोस्। कप खाली भएपछि वा 20 मिनेटपछि यो बन्द हुन्छ। आफैं बन्द गर्न पावर बटन 1 सेकेन्ड थिचिराख्नुहोस्।

सुझावहरू

- यो चलन औषधि वा सलाइन चाहिन्छ। कपमा सादा पानी, धाराको पानी वा डिस्टिल्ड पानी भए यो आफैं बन्द हुन्छ।
- फिँज बनेर कुहिरो रोकियो भने, यसलाई बन्द गर्नुहोस्, बिस्तारै हल्लाउनुहोस् र फेरि सुरु गर्नुहोस्।
- उपचार गर्दा भुनभुन आवाज आउन सक्छ; प्रायः बिस्तारै हल्लाउँदा यो शान्त हुन्छ। कप भरिएको बेला यसलाई जोडले नहल्लाउनुहोस्।
- औषधि सकियो तर यो चलिरह्यो भने, तुरुन्तै बन्द गर्नुहोस्।

सफा गर्ने, हरेक उपचारपछि

01

छिटो पखाल्नुहोस्

कप खाली गर्नुहोस्। करिब 2 ml डिस्टिल्ड पानी हाल्नुहोस्, बिको बन्द गर्नुहोस्, 10 सेकेन्ड हल्लाउनुहोस् र पानी फ्याँक्नुहोस्।

02

आफैं सफा गर्ने मोड चलाउनुहोस्

कपमा सफा पानी भरनुहोस्। यन्त्र बन्द भएको बेला पावर बटनलाई करिब 5 सेकेन्ड थिचिराख्नुहोस्। सफा हुँदै गर्दा बत्ती पालैपालो हरियो, नीलो र पहेँलो हुन्छ। करिब 5 मिनेटपछि यो आफैं रोकिन्छ। चाँडै रोक बटन 1 सेकेन्ड थिचिराख्नुहोस्।

03

कप र मास्क धुनुहोस्

यिनलाई निकालेर बगिरहेको मनतातो पानीमा एक मिनेट पखाल्नुहोस्। त्यसपछि मनतातो पानीमा अलिकति भाँडा माइले साबुन (प्रति लिटर करिब 1 ml) हालेर धुनुहोस्। हरेक सतह र मास्कका हावा जाने प्वालहरूमा नरम ब्रस चलाउनुहोस्। त्यसपछि अर्को एक मिनेट पखाल्नुहोस्।

04

यन्त्र र कन्ट्याक्ट पुछ्नुहोस्

यन्त्रलाई ओसिलो कपडाले पुछ्नुहोस्, त्यसपछि सुकाउनुहोस्। यन्त्र र कपका धातुका कन्ट्याक्टहरूलाई डिस्टिल्ड पानीमा भिजाएको कपासको काँटी (कटन बड) ले सफा गर्नुहोस्।

05

सुकाउनुहोस् र राख्नुहोस्

सबै कुरा कम्तीमा 12 घण्टा हावामा सुक्न दिनुहोस्, वा सफा गज कपडाले सुकाउनुहोस्। क्याप फेरि लगाउनुहोस्। यसलाई सफा, सुक्खा र सिधा घाम नपर्ने ठाउँमा राख्नुहोस्।

06

बेलाबेलामा किटाणुरहित पार्नुहोस्

सफा कप र मास्कलाई 70% रबिड अल्कोहलमा कम्तीमा 5 मिनेट डुबाएर राख्नुहोस्। डिस्टिल्ड पानीले एक मिनेट पखाल्नुहोस्, र मास्कका हावा जाने प्वालहरूबाट पनि पानी बगाउनुहोस्। यिनलाई पूरै सुक्न दिनुहोस्।

कृपया यी कुरा नगर्नुहोस्

- मुख्य यन्त्रलाई कहिल्यै पानी वा कुनै किटाणुनाशकमा नडुबाउनुहोस्। यसलाई पुछ्ने मात्र गर्नुहोस्।
- पार्टपुर्जाहरू कहिल्यै नउमाल्नुहोस्, माइक्रोवेभमा नसुकाउनुहोस्, र डिसवासरमा नराख्नुहोस्।
- बेन्जिन वा पेन्ट थिनरजस्ता कडा रसायनले यसलाई कहिल्यै सफा नगर्नुहोस्।
- खाली कपमा यसलाई कहिल्यै नचलाउनुहोस्।

केही चलेन भने**यो अन हुँदैन**

- चार्ज गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
- चार्जिङ केबल राम्ररी जोडिएको छ कि छैन हेर्नुहोस्।

प्राविधिक विवरण

तौल	करिब 98 ग्राम (3.5 औंस)
आकार	करिब 50 × 51 × 115 मिमि (2 × 2 × 4.5 इन्च)

अन हुन्छ, तर कुहिरो निस्कँदैन

- पहुँलो बत्ती झिम्किँदै छ भने ब्याट्री कम छ। चार्ज गर्नुहोस्।
- यन्त्र र कपका धातुका कन्ट्याक्टहरू सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
- कप क्लिक आवाजसहित आफ्नो ठाउँमा बसेको छ भनी निश्चित गर्नुहोस्।
- आफैं सफा गर्ने मोड चलाउनुहोस्। त्यसपछि पनि कुहिरो निस्केन भने कप फेर्नुपर्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्।

हरियो बत्ती 10 सेकेन्डसम्म मधुरो-चर्को हुँदै बल्छ, त्यसपछि यो बन्द हुन्छ

- औषधि थप्नुहोस्; कप खाली हुन सक्छ।
- औषधि वा सलाइन प्रयोग गर्नुहोस्, सादा वा डिस्टिल्ड पानी होइन।
- कप क्लिक आवाजसहित आफ्नो ठाउँमा बसेको छ र कन्ट्याक्टहरू सफा छन् भनी निश्चित गर्नुहोस्।
- झोल कुहिरो प्लेटमा पुगोस् भनेर अगाडिको भाग आफूतिर ढल्काउनुहोस्।

उपचार गर्दागर्दै यो बन्द हुन्छ

- कप खाली हुन सक्छ। औषधि थप्नुहोस्।
- झोल कुहिरो प्लेटमा पुगोस् भनेर अगाडिको भाग आफूतिर ढल्काउनुहोस्।
- यो 20 मिनेटपछि पनि बन्द हुन्छ। फेरि सुरु गर्न बटन थिचिराख्नुहोस्।

औषधि चुहिन्छ

- रेखाभन्दा माथिको औषधि फ्याँक्नुहोस्, त्यसपछि फेरि सुरु गर्नुहोस्।
- उपचार गर्दा यसलाई स्थिर समालुहोस्।
- कप चर्किएको छ वा यसको सिल खिडिएको छ भने, कप फेर्नुपर्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्।

प्रश्नहरू

जान्नुपर्ने कुराहरू।

आफैं सफा गर्ने मोड कसरी प्रयोग गर्ने?

कपमा सफा पानी हाल्नुहोस् (बच्चाहरूको मोडेलमा करिब 6 ml) र बिको बन्द गर्नुहोस्। बत्ती बलेर रडः फेरिन नथालुन्जेल पावर बटनलाई करिब 5 सेकेन्ड थिचिराख्नुहोस्। त्यसपछि नेबुलाइजर छोटो-छोटो समयका लागि चल्छ: कुहिरो प्लेटमा बाँकी रहेको औषधि हल्लिएर निस्कोस् भनेर यो बारम्बार आफैं अन र अफ हुन्छ। यसलाई रोक्न बटन फेरि थिच्नुहोस्; वयस्कहरूको मोडेल करिब 5 मिनेटपछि आफैं पनि रोकिन्छ। यो कुहिरो सासमा नलिनुहोस्, र सकिएपछि पानी फ्याँक्नुहोस्।

मसँग कुन मोडेल छ?

बच्चाहरूको मोडेल नीलो, हरियो, सुन्तला रडः वा सेतो हुन्छ, त्यसमा कार्टुन अनुहार हुन्छ, र यसको सुन्तला रडःको चुच्चो नै बटन हो। वयस्कहरूको मोडेल सुन्तला रडःको हुन्छ, र यसमा गोलो सेतो पावर बटन हुन्छ।

कुन मास्क प्रयोग गर्ने?

सानो मास्क बच्चाहरूका लागि हो र ठूलो मास्क वयस्कहरूका लागि। मास्कले नाक र मुख दुवै छोप्नुपर्छ। मुखबाट सास फेर्न रुचाउने वयस्कहरूले यसको सट्टा माउथपिस प्रयोग

औषधिको कप	करिब 10 ml
कुहिरो बन्ने दर	प्रति मिनेट कम्तीमा 0.2 ml
कणको आकार	करिब 3 माइक्रोन (MMAD)
आवाज	50 dB वा त्योभन्दा कम
ब्याट्री	भित्रै जडान गरिएको 3.7 V, 600 mAh लिथियम ब्याट्री; 15 मिनेट चार्ज गर्दा 2 घण्टासम्म प्रयोग
चार्जिङ	USB-A देखि USB-C केबल, 5 V / 1 A
आफैं बन्द हुने समय	20 मिनेट
प्रयोग गर्ने तापक्रम	5 °C देखि 40 °C (41 °F देखि 104 °F) सम्म

सुरक्षा पहिलो

- डाक्टरले लेखिदिएको औषधि र मात्रा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। डाक्टरलाई नसोधी मात्रा नबदल्नुहोस्, र कति पटक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि नबदल्नुहोस्।
- पूरै उपचारभरि बच्चासँगै बस्नुहोस्। नेबुलाइजर प्रयोग नगर्दा साना पार्टिपुर्जा र तारहरू बच्चाबाट टाढा राख्नुहोस्।
- हरेक व्यक्तिको आफ्नै मास्क वा माउथपिस हुनुपर्छ। यिनलाई अरूसँग नबाँड्नुहोस्।
- हरेक उपचारपछि कपमा बाँकी रहेको औषधि फ्याँक्नुहोस्। अर्को पटकका लागि नसाँच्चुहोस्।
- उपचारपछि सास फेर्न सजिलो भएन, वा झन् गाह्रो भयो भने, आफ्नो डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्। आपत्कालमा 911 मा फोन गर्नुहोस्।
- आगो लाग्न सक्ने (ज्वलनशील) ग्यास वा बेहोस बनाउने (एनेस्थेसिया) ग्यासको नजिक यो प्रयोग नगर्नुहोस्।

गर्न सकनुहुन्छ।

- यो जीवन बचाउने (लाइफ सपोर्ट) यन्त्र होइन। यो बेहोस भएका वा आफैं सास फेर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि होइन।

के उपचारका लागि यसमा सादा पानी हाल्न मिल्छ?

मिल्दैन। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि वा सलाइन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। कपमा सादा वा डिस्टिल्ड पानी भए वयस्कहरूको मोडेल आफैं बन्द हुन्छ। सफा पानी सफा गर्ने मोडका लागि मात्र हो, र त्यो कुहिरो सासमा लिनु हुँदैन।

यो आफैं किन बन्द भयो?

दुवै मोडेल 20 मिनेटपछि रोकिन्छन्, र कप सुकेपछि पनि रोकिन्छन्। वयस्कहरूको मोडेलमा, झिम्किने पहुँलो बत्तीको अर्थ ब्याट्री कम छ। मधुरो-चर्को हुँदै बल्ले हरियो बत्तीको अर्थ झोल कुहिरो प्लेटसम्म पुगिरहेको छैन।

के कपमा अलिकति औषधि बाँकी रहनु सामान्य हो?

हो। अलिकति औषधि सधैं बाँकी रहन्छ। हरेक उपचारपछि यसलाई फ्याँक्नुहोस्, र साँचेर नराख्नुहोस्।

के चार्ज हुँदै गर्दा यो प्रयोग गर्न मिल्छ?

मिल्दैन। पहिले चार्ज गर्नुहोस्, त्यसपछि उपचार दिनुहोस्। चार्ज गर्न प्लगमा जोडिएको बेला वयस्कहरूको मोडेल चल्दैन।

पार्टपुर्जा कहिले फेर्नुपर्छ?

मास्क चर्कियो, कडा भयो, वा अनुहारमा राम्ररी टाँसिएन भने फेर्नुहोस्। सफा गरेपछि पनि कुहिरो निस्केन भने कप फेर्नुहोस्। नयाँ मास्क र माउथपिसका लागि हामीलाई फोन गर्नुहोस्।

तपाईंको नेबुलाइजरबारे

पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर

बोक्न मिल्ने र हलुका

झोला वा खलतीमा अट्ने जति सानो। त्यसैले उपचार सधैं तपाईंको पहुँचमा हुन्छ।

तीन स्पिड सेटिङ

यो सुविधा थोरै पोर्टेबल नेबुलाइजरमा मात्र पाइन्छ। तीन स्पिडले उपचारलाई बिरामी र औषधिअनुसार मिलाउन सकिन्छ।

आफैं सफा हुने

यसमा सफा गर्ने मोड भित्रै बनेको छ। प्रयोगपछि यसले यन्त्र सफा गर्छ, र यो अर्को उपचारका लागि तयार हुन्छ।

धेरै शान्त

विद्यालयमा, काममा वा सुतिरहेको बच्चाको छेउमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी शान्त।

लामो समय चल्ने लिथियम ब्याट्री

15 मिनेट चार्ज गर्दा दुई घण्टासम्म लगातार प्रयोग। यो लगभग फोनलाई अलिकति चार्ज गरेजस्तै हो।

एउटै बटनले चल्छ

बच्चा र वयस्क दुवैलाई चलाउन सजिलो। देशभरका क्लिनिकहरूले यसमा पहिलेदेखि नै भरोसा गर्छन्।

US Brace & Limb Co. (USBL) द्वारा बनाइएको।

हामी मदतका लागि यहाँ छौं

अझै प्रश्न छ? हामीलाई फोन गर्नुहोस्।

तपाईं हामीलाई सोमबारदेखि शुक्रबार, New York को समयअनुसार बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेर्नका लागि पार्टपुर्जा पनि पाइन्छ: दुई साइजका मास्क, माउथपिस, ट्युब, र हामीले दिएका नेबुलाइजरका फिल्टरहरू। आफ्नो नाम र चाहिएको सामान बताउन हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी तपाईंको बीमा कभरेज जाँच्नेछौं र सामान पठाउनेछौं।

हाम्रो समयबाहिर, आफ्नो औषधिबारे प्रश्न भए आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिस्टलाई फोन गर्नुहोस्। सास फेर्न गाह्रो भए 911 मा फोन गर्नुहोस्।

यो गाइड अनलाइन: wellness-supplies.com/how-to-use/ultrasonic/ne