



آپ کا پورٹیبل الٹراسونک نیبولائزر، قدم بہ قدم۔

جیب میں آ جانے والا، چارج ہونے والا نیبولائزر۔ یہ مائع دوا کو باریک پھوار میں بدل دیتا ہے۔ آپ یہ پھوار ماسک یا ماؤتھ پیس کے ذریعے سانس کے ساتھ اندر لیتے ہیں۔ یہ بچوں کے ماڈل اور بڑوں کے ماڈل میں آتا ہے۔ دونوں تھوڑے مختلف طریقے سے چلتے ہیں، اس لیے نیچے اپنا ماڈل چنیں۔

کوئی سوال ہے؟ پیر سے جمعہ، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک (نیو یارک کے وقت کے مطابق)، **351-3045 (718)** پر فون کریں۔

ابھی سانس لینے میں مشکل ہے؟ 911 پر فون کریں۔ اگر سانس لینا بہت مشکل ہو، اگر آپ یا آپ کا بچہ پورے جملے نہ بول سکے، یا اگر ہونٹ یا ناخن نیلے یا سرمئی نظر آئیں، تو 911 پر فون کریں۔ علاج ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔

پہلے دیکھیں

اسے جڑتے اور چلتے ہوئے دیکھیں۔

ویڈیو میں پورٹیبل نیبولائزر کو شروع سے آخر تک دکھایا گیا ہے۔ ہر قدم نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ آپ اس کی ایک کاپی اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں یا پرنٹ کر سکتے ہیں۔

ویڈیو انگریزی میں ہے۔

ویڈیو: <https://www.youtube.com/watch?v=QypMcyrtig>

ڈبے میں کیا ہے

دیکھ لیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔

✓ نیبولائزر، اپنے دوا کے کپ اور پھوار کے دہانے کو ڈھکنے والی کیپ کے ساتھ


✓ بڑوں کا ماسک (بڑا)

✓ بچوں کا ماسک (چھوٹا)

✓ ماؤتھ پیس

✓ چارج کرنے والی USB تار (USB-A سے USB-C)

✓ ہدایات کی کتاب (مینول)

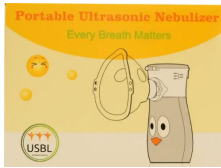

بڑوں کے ماڈل کا ڈبا۔

بچوں کے ماڈل کا ڈبا۔



بچوں والے ڈبے کی ایک طرف: بڑوں کا ماسک، بچوں کا ماسک اور ماؤتھ پیس۔

قدم بہ قدم

بچوں کا ماڈل

نیلا، سبز، نارنجی یا سفید، کارٹون والے چہرے کے ساتھ۔ نارنجی چونچ آن/آف بٹن ہے۔



پرزوں کو پہچانیں

② سامنے پھوار نکلنے کا دہانہ، جہاں ماسک یا ماؤتھ پیس لگتا ہے؛ جب استعمال نہ ہو رہا ہو تو کیپ اسے ڈھک کر رکھتی ہے

④ سامنے والی لائٹ: چارج ہونے، صفائی کے چکر، اور مشین کے چلنے کے بارے میں بتاتی ہے

⑥ پیچھے چارج کرنے والا USB-C پورٹ

① دوا کا کپ، اوپر اٹھا کر کھلنے والے ڈھکن کے ساتھ؛ اس میں 10 ملی لیٹر تک آتا ہے

③ آن/آف بٹن: سامنے والی نارنجی چونچ

⑤ پیچھے ریلیز بٹن (کپ چھڑانے والا بٹن)، کپ اتارنے کے لیے

چارج کرنا

02 لائٹ دیکھیں

چارج ہوتے وقت لائٹ پیلی رہتی ہے۔ بیٹری پوری بھرنے پر یہ سبز ہو جاتی ہے۔

01 تار لگائیں

تار کا USB-C والا سرا پیچھے والے چارجنگ پورٹ میں لگائیں۔ USB-A والا سرا دیوار والے USB اڈاپٹر یا کمپیوٹر میں لگائیں۔

03 اپنی بیٹری کے بارے میں جانیں

15 منٹ چارج کرنے سے دو گھنٹے تک استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر نیبولائزر کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا ہو، تو بیٹری ٹھیک رکھنے کے لیے اسے کم از کم ہر دو مہینے بعد چارج کریں۔

بر علاج

02 کپ بھریں

ڈھکن کھولیں اور اپنے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا ڈالیں۔ 10 ملی لیٹر سے زیادہ نہ بھریں۔ ڈھکن کو دبا کر بند کریں، یہاں تک کہ کلک کی آواز آئے۔

01 تیاری کریں

اپنے ہاتھ دھوئیں۔ یقین کر لیں کہ کپ، ماسک اور ماؤتھ پیس صاف اور خشک ہیں۔ سیدھے ہو کر بیٹھیں۔

04 آن کریں اور اسپیڈ چنیں

آن/آف بٹن دبائیں۔ تیز، درمیانی اور ہلکی اسپیڈ میں بدلنے کے لیے اسے دوبارہ دبائیں۔ مسلسل پھوار اور نیلی لائٹ کا مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے۔

03 ماسک یا ماؤتھ پیس لگائیں

سامنے سے کیپ اتاریں۔ ماسک یا ماؤتھ پیس کو گول دہانے پر دبا کر لگائیں۔ شیر خوار بچوں اور بچوں کے لیے ایسا ماسک استعمال کریں جو ناک اور منہ دونوں کو ڈھکے۔

06 پورا وقت دیں

5 ملی لیٹر کی خوراک کو تیز اسپیڈ پر تقریباً 15 منٹ، درمیانی پر 20 منٹ، یا ہلکی پر 30 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 20 منٹ بعد خود بند ہو جاتا ہے۔ اگر دوا بچی ہو، تو جاری رکھنے کے لیے بٹن دبائیں۔

05 معمول کے مطابق سانس لیں

نیبولائزر کو سیدھا کھڑا پکڑیں۔ ماؤتھ پیس کے گرد ہونٹ بند کریں، یا ماسک کو ناک اور منہ پر اچھی طرح لگائیں۔ آہستہ آہستہ اور معمول کے مطابق سانس لیں۔

جب آواز بدل جائے، یا کپ خالی ہونے کی وجہ سے یہ بند ہو جائے، تو رک جائیں۔ کپ میں چند قطرے بچ جانا عام بات ہے۔

بچے کا علاج کرتے وقت

پورا وقت ماسک کو چہرے کے ساتھ اچھی طرح لگا کر رکھیں۔ اگر ماسک چہرے سے تھوڑا سا بھی دور ہو، تو بہت سی دوا پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے ہی باہر نکل جاتی ہے۔ روتا ہوا بچہ بھی کم دوا اندر لیتا ہے۔ اس لیے پرسکون وقت، بچے کا پسندیدہ شو، یا کوئی کتاب واقعی بہت مدد کرتے ہیں۔

مفید مشورے

- پورا وقت اسے سیدھا کھڑا رکھیں، تاکہ دوا پھوار والی پلیٹ پر رہے۔
- صرف اپنے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی مائع دوا یا سلائن ہی استعمال کریں۔ کبھی بھی سادہ پانی، تیل، دودھ یا گاڑھا مائع نہ ڈالیں۔
- بچے اسے صرف کسی بڑے کی نگرانی میں ہی استعمال کریں۔ بچے کو کبھی بھی اس کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں۔

صفائی، ہر علاج کے بعد

01 کپ خالی کریں

کپ میں بچی ہوئی دوا انڈیل دیں۔

02 ضرورت ہو تو کپ اتاریں

پیچھے والا ریلیز بٹن دبائیں اور کپ کو آگے کی طرف دھکیل کر سرکائیں اور اتار لیں۔ واپس لگانے کے لیے، اسے اتنا دھکیلیں کہ کلک کی آواز آئے۔

03 ماسک اور ماؤتھ پیس صاف کریں

انہیں اتاریں۔ پھر جراثیم سے پاک کرنے کے لیے انہیں میڈیکل الکحل وائپ سے پونچھیں، یا بھگو کر رکھیں۔ نیم گرم پانی کے نیچے کھنگالیں اور ہوا میں سوکھنے دیں۔

04 خودکار صفائی کا چکر چلائیں

کپ میں تقریباً 6 ملی لیٹر صاف پانی ڈالیں اور ڈھکن بند کریں۔ آن/آف بٹن کو تقریباً 5 سیکنڈ دبائے رکھیں۔ صفائی کے دوران لائٹ سبز اور سرخ جلتی بجھتی ہے۔ یہ پھوار سانس کے ساتھ اندر نہ لیں۔

05 پونچھیں اور سنبھال کر رکھیں

باہر کی طرف کو نرم، خشک، صاف تولیے سے پونچھیں۔ نیبولائزر کو کبھی بھی پانی سے نہ دھوئیں اور نہ ہی پانی میں ڈالیں۔ کیپ واپس لگائیں اور اسے ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔

براہ کرم یہ نہ کریں

- دبائے کے اندر موجود دھات کی چھوٹی پھوار والی پلیٹ کو کبھی بھی انگلیوں، برش یا کسی سخت چیز سے نہ چھوئیں۔
- خالی کپ کے ساتھ اسے کبھی نہ چلائیں۔
- اسے کبھی بھی گرم سطح پر نہ رکھیں۔

اگر کچھ کام نہ کر رہا ہو

پھوار کم ہے یا بالکل نہیں

- دوا ڈالیں؛ ہو سکتا ہے کپ میں کافی دوا نہ ہو۔
- نیبولائزر کو سیدھا کھڑا پکڑیں۔
- بہت گاڑھی دوائیں شاید پھوار نہ بنیں۔ اپنے فارماسسٹ سے پوچھیں۔
- ٹھنڈے کمرے میں، 3 سے 6 ملی لیٹر گرم پانی ڈال کر مشین چلائیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو جائے (یہ سانس کے ساتھ اندر نہ لیں)۔ پھر دوبارہ کوشش کریں۔

پھوار کمزور ہے

- بیٹری چارج کریں۔
- ہوا کے بلبے نکالنے کے لیے کپ کو ہلکا سا تھپتھپائیں یا آہستہ سے ہلائیں۔ پھر دوبارہ چلائیں۔
- پھوار والی پلیٹ صاف کریں: 3 سے 6 ملی لیٹر پانی میں سرکے کے 2 یا 3 قطرے ڈال کر، پانی ختم ہونے تک مشین چلائیں (یہ سانس کے ساتھ اندر نہ لیں)۔ پھر کپ صاف کریں۔
- اگر ان میں سے کچھ بھی کام نہ کرے، تو ہو سکتا ہے پھوار والی پلیٹ گھس گئی ہو۔ ہمیں فون کریں۔

کپ میں دوا ہے، مگر پھوار نہیں نکلتی

- دوا ڈالتے وقت ہوا کے بلبے پلیٹ کو روک سکتے ہیں۔ کپ کو تھپتھپائیں یا آہستہ سے ہلائیں، پھر دوبارہ آن کریں۔

آخر میں تھوڑی دوا بچ جاتی ہے

- یہ عام بات ہے۔ جب آواز بدل جائے، یا یہ خود بند ہو جائے، تو رک جائیں۔

تکنیکی تفصیلات

وزن	تقریباً 100 گرام (3.5 اونس)
سائز	118 ملی میٹر اونچا، 39.5 ملی میٹر چوڑا (تقریباً 4.6 × 1.6 انچ)
دوا کا کپ	10 ملی لیٹر تک
پھوار بننے کی رفتار	تقریباً 0.2 ملی لیٹر فی منٹ
ذرات کا سائز	5 مائیکرون یا اس سے چھوٹے
آواز	50 dB یا اس سے کم
بیٹری	اندر لگی لیتھیم بیٹری؛ 15 منٹ چارج کرنے پر 2 گھنٹے تک استعمال
چارجنگ	USB-A سے USB-C تار، 5 A / 1 V
خود بند ہونا	20 منٹ
استعمال کا درجہ حرارت	5 °C سے 40 °C (41 °F سے 104 °F)

قدم بہ قدم

بڑوں کا ماڈل

نارنجی رنگ کا۔ اس پر گول سفید پاور بٹن ہے، اور بٹن کے اوپر ایک چھوٹی لائٹ ہے۔



پرزوں کو پہچانیں

01

دوا کا کپ، کھلنے والے ڈھکن کے ساتھ؛ اس میں تقریباً 10 ملی لیٹر آتا ہے

03

گول پاور بٹن

05

پیچھے PUSH لکھا ہوا ریلیز بٹن، کپ اتارنے کے لیے

02

سامنے پھوار نکلنے کا دہانہ، جہاں ماسک یا ماؤتھ پیس لگتا ہے؛ جب استعمال نہ ہو رہا ہو تو کیپ اسے ڈھک کر رکھتی ہے

04

بٹن کے اوپر لائٹ: اسپیڈ، چارج ہونے، اور کم بیٹری کے بارے میں بتاتی ہے

06

پیچھے چارج کرنے والا USB-C پورٹ، ربڑ کے ایک چھوٹے ڈھکن کے پیچھے

چارج کرنا

01

تار لگائیں

پیچھے والا ربڑ کا ڈھکن کھولیں اور تار کا USB-C والا سرا لگائیں۔ USB-A والا سرا دیوار والے USB ایڈاپٹر یا کمپیوٹر میں لگائیں۔

03

پوری چارج ہونے پر تار نکال دیں

تار نکال دیں اور ربڑ کا ڈھکن بند کریں۔ چارج ہوتے وقت نیبولائزر نہیں چلے گا۔

04

اپنی بیٹری کے بارے میں جانیں

15 منٹ چارج کرنے سے دو گھنٹے تک استعمال ہو جاتا ہے۔ جلتی بجھتی پیلی لائٹ کا مطلب ہے کہ بیٹری کم ہے۔ اگر اسے کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا ہو، تو کم از کم ہر تین مہینے بعد چارج کریں۔

بر علاج

01

تیاری کریں

اپنے ہاتھ دھوئیں۔ یقین کر لیں کہ کپ، ماسک اور ماؤتھ پیس صاف اور خشک ہیں۔

03

دوا ڈالیں

کپ کا ڈھکن کھولیں اور اپنے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا ڈالیں: کم از کم 1 ملی لیٹر، اور کپ پر بنی لکیر سے اوپر نہیں۔ ڈھکن کو مضبوطی سے بند کریں۔

02

کپ اتاریں

پیچھے والا PUSH بٹن دبائے رکھیں، اور کپ کو آگے کی طرف سرکا کر مشین سے اتار لیں۔

04

کپ واپس لگائیں

کپ کو سرکا کر واپس لگائیں، یہاں تک کہ کلک کی آواز آئے۔ کپ اور مشین کے درمیان دھات کے چھوٹے کانٹیکٹ صاف اور خشک ہونے چاہئیں، ورنہ ہو سکتا ہے یہ آن نہ ہو۔

05 ماسک یا ماؤتھ پیس لگائیں

سامنے سے کیپ اتاریں، اور ماسک یا ماؤتھ پیس کو گول دبانے پر دبا کر لگائیں۔

06 آن کریں اور اسپید چنیں

پاور بٹن دبائے رکھیں؛ تقریباً 2 سیکنڈ میں پھوار شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بار بٹن کو ایک دفعہ دبا کر فوراً چھوڑنے سے اسپید بدلتی ہے: سبز لائٹ کم، نیلی درمیانی، پیلی تیز۔

07 معمول کے مطابق سانس لیں

اسے ٹکا کر پکڑیں، آرام سے رہیں، اور معمول کے مطابق سانس لیں۔ ماسک کے ہوا والے سوراخ نہ ڈھکیں۔

08 ختم کریں

آخر کے قریب، سامنے والے حصے کو تھوڑا سا اپنی طرف جھکائیں، تاکہ آخری قطرے پھوار والی پلیٹ تک پہنچ جائیں۔ کپ خالی ہونے پر یا 20 منٹ بعد یہ بند ہو جاتا ہے۔ خود بند کرنے کے لیے، پاور بٹن کو 1 سیکنڈ دبائے رکھیں۔

مفید مشورے

- اسے چلنے کے لیے دوا یا سلانن چاہیے۔ کپ میں سادہ پانی، نلکے کا پانی یا ڈسٹلڈ پانی ہو، تو یہ خود بند ہو جاتا ہے۔
- اگر جھاگ بن جائے اور پھوار رک جائے، تو اسے بند کریں، آہستہ سے ہلائیں، اور دوبارہ چلائیں۔
- علاج کے دوران بھنبھناہٹ کی آواز آ سکتی ہے؛ آہستہ سے ہلانے سے عام طور پر یہ رک جاتی ہے۔ کپ بھرا ہو تو اسے زور سے نہ ہلائیں۔
- اگر دوا ختم ہو گئی ہو مگر یہ چلتا رہے، تو اسے فوراً بند کریں۔

صفائی، ہر علاج کے بعد

01 جلدی سے کھنگالیں

کپ خالی کریں۔ تقریباً 2 ملی لیٹر ڈسٹلڈ پانی ڈالیں اور ڈھکن بند کریں۔ 10 سیکنڈ ہلائیں اور پانی انڈیل دیں۔

02 خودکار صفائی کا چکر چلائیں

کپ میں صاف پانی بھریں۔ مشین بند ہو تو پاور بٹن کو تقریباً 5 سیکنڈ دبائے رکھیں۔ صفائی کے دوران لائٹ باری باری سبز، نیلی اور پیلی ہوتی ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد یہ خود رک جاتا ہے۔ پہلے روکنے کے لیے، بٹن کو 1 سیکنڈ دبائے رکھیں۔

03 کپ اور ماسک دھوئیں

انہیں اتاریں اور بہتے ہوئے نیم گرم پانی کے نیچے ایک منٹ کھنگالیں۔ پھر نیم گرم پانی میں تھوڑا سا برتن دھونے والا صابن (تقریباً 1 ملی لیٹر فی لیٹر) ڈال کر دھوئیں۔ ہر سطح پر اور ماسک کے ہوا والے سوراخوں پر نرم برش پھیریں۔ پھر ایک منٹ اور کھنگالیں۔

04 مشین اور کانٹیکٹ پونچھیں

مشین کے باہر والے حصے کو نم کپڑے سے پونچھیں، پھر خشک کریں۔ مشین اور کپ پر لگے دھات کے کانٹیکٹ کو ڈسٹلڈ پانی میں بھیگی روئی والی تیلی (کائن بڈ) سے صاف کریں۔

05 خشک کریں اور سنبھال کر رکھیں

ہر چیز کو کم از کم 12 گھنٹے ہوا میں سوکھنے دیں، یا صاف گاز (پٹی والے کپڑے) سے خشک کریں۔ کیپ واپس لگائیں۔ اسے صاف، خشک، اور سیدھی دھوپ سے دور رکھیں۔

06 کبھی کبھی جراثیم سے پاک کریں

صاف کیے ہوئے کپ اور ماسک کو کم از کم 5 منٹ کے لیے 70% رینگ الکحل میں بھگو کر رکھیں۔ پھر ایک منٹ ڈسٹلڈ پانی سے کھنگالیں، اور ماسک کے ہوا والے سوراخوں میں سے بھی پانی گزاریں۔ پوری طرح سوکھنے دیں۔

براہ کرم یہ نہ کریں

- مرکزی مشین کو کبھی بھی پانی یا کسی بھی جراثیم کش محلول میں نہ ڈالیں۔ اسے صرف پونچھیں۔
- پرزوں کو کبھی نہ ابالیں، مائیکرو ویو میں خشک نہ کریں، اور ڈش واش میں نہ ڈالیں۔
- اسے کبھی بھی سخت کیمیکل، جیسے بینزین یا پینٹ تھنر، سے صاف نہ کریں۔
- خالی کپ کے ساتھ اسے کبھی نہ چلائیں۔

تکنیکی تفصیلات

اگر کچھ کام نہ کر رہا ہو

یہ آن نہیں ہوتا

- اسے چارج کریں، پھر دوبارہ کوشش کریں۔
- دیکھیں کہ چارج کرنے والی تار اچھی طرح لگی ہوئی ہے۔

یہ آن ہو جاتا ہے، مگر پھوار نہیں نکلتی

- اگر لائٹ پیلی جلتی بجھتی ہے، تو بیٹری کم ہے۔ اسے چارج کریں۔
- مشین اور کپ پر لگے دھات کے کانٹیکٹ صاف کریں، پھر دوبارہ کوشش کریں۔
- یقین کر لیں کہ کپ کلک کر کے اپنی جگہ پر لگ گیا ہے۔
- خودکار صفائی کا چکر چلائیں۔ اگر پھر بھی پھوار نہ نکلے، تو کپ بدلنا پڑے گا۔ ہمیں فون کریں۔

سبز لائٹ 10 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ جلتی بجھتی ہے، پھر

یہ بند ہو جاتا ہے

- دوا ڈالیں؛ ہو سکتا ہے کپ خالی ہو۔
- دوا یا سلائن استعمال کریں، سادہ یا ڈسٹلڈ پانی نہیں۔
- یقین کر لیں کہ کپ کلک کر کے اپنی جگہ پر لگ گیا ہے اور کانٹیکٹ صاف ہیں۔
- سامنے والے حصے کو اپنی طرف جھکائیں، تاکہ مائع پھوار والی پلیٹ کو چھوئے۔

یہ علاج کے دوران بند ہو جاتا ہے

- ہو سکتا ہے کپ خالی ہو۔ دوا ڈالیں۔
- سامنے والے حصے کو اپنی طرف جھکائیں، تاکہ مائع پھوار والی پلیٹ کو چھوئے۔
- یہ 20 منٹ بعد بھی بند ہو جاتا ہے۔ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بٹن دبائے رکھیں۔

دوا ٹپکتی ہے

- لکیر سے اوپر والی دوا انڈیل دیں، پھر دوبارہ چلائیں۔
- علاج کے دوران اسے ٹکا کر پکڑیں۔
- اگر کپ میں دراڑ ہو یا اس کی سیل گھس گئی ہو، تو کپ بدلنا پڑے گا۔ ہمیں فون کریں۔

وزن	تقریباً 98 گرام (3.5 اونس)
سائز	تقریباً 50 × 51 × 115 ملی میٹر (2 × 2 × 4.5 انچ)
دوا کا کپ	تقریباً 10 ملی لیٹر
پھوار بننے کی رفتار	کم از کم 0.2 ملی لیٹر فی منٹ
ذرات کا سائز	تقریباً 3 مائیکرون (MMAD)
آواز	50 dB یا اس سے کم
بیٹری	اندر لگی 3.7 600 mAh V، لیٹھیم بیٹری؛ 15 منٹ چارج کرنے پر 2 گھنٹے تک استعمال
چارجنگ	USB-A سے USB-C تار، 5 A 1 V
خود بند ہونا	20 منٹ
استعمال کا درجہ حرارت	5 °C سے 40 °C (41 °F سے 104 °F)

جاننے کی باتیں۔

خودکار صفائی کی سیٹنگ کیسے استعمال کریں؟

کپ میں صاف پانی ڈالیں (بچوں کے ماڈل کے لیے تقریباً 6 ملی لیٹر) اور ڈھکن بند کریں۔ پاور بٹن کو تقریباً 5 سیکنڈ دبائے رکھیں، یہاں تک کہ لائٹ جل کر رنگ بدلنے لگے۔ پھر نیپولائزر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے۔ یہ بار بار خود آن اور بند ہوتا ہے، تاکہ پھوار والی پلیٹ پر بچی ہوئی دوا ہل کر الگ ہو جائے۔ اسے روکنے کے لیے بٹن دوبارہ دبائیں؛ بڑوں کا ماڈل تقریباً 5 منٹ بعد خود بھی رک جاتا ہے۔ یہ پھوار سانس کے ساتھ اندر نہ لیں، اور صفائی ختم ہونے پر پانی انڈیل دیں۔

میرے پاس کون سا ماڈل ہے؟

بچوں کا ماڈل نیلا، سبز، نارنجی یا سفید ہوتا ہے، اور اس پر کارٹون والا چہرہ بنا ہوتا ہے۔ اس کی نارنجی چونچ ہی بٹن ہے۔ بڑوں کا ماڈل نارنجی ہوتا ہے، اور اس کا پاور بٹن گول اور سفید ہوتا ہے۔

کون سا ماسک استعمال کریں؟

چھوٹا ماسک بچوں کے لیے ہے اور بڑا ماسک بڑوں کے لیے۔ ماسک کو ناک اور منہ دونوں کو ڈھکنا چاہیے۔ جو بڑے منہ سے سانس لینا پسند کرتے ہیں، وہ ماسک کی جگہ ماؤتھ پیس استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا علاج کے لیے اس میں سادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟

نہیں۔ صرف اپنے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا یا سلائن ہی استعمال کریں۔ کپ میں سادہ یا ڈسٹلڈ پانی ہو، تو بڑوں کا ماڈل خود بند ہو جاتا ہے۔ صاف پانی صرف صفائی کے چکر کے لیے ہے، اور وہ پھوار سانس کے ساتھ اندر نہیں لینی چاہیے۔

یہ خود کیوں بند ہو گیا؟

دونوں ماڈل 20 منٹ بعد رک جاتے ہیں۔ کپ خالی ہونے پر بھی یہ رک جاتے ہیں۔ بڑوں کے ماڈل پر، جلتی بجھتی پیلی لائٹ کا مطلب ہے کہ بیٹری کم ہے۔ آہستہ آہستہ جلتی بجھتی سبز لائٹ کا مطلب ہے کہ مائع پھوار والی پلیٹ تک نہیں پہنچ رہا۔

کیا کپ میں تھوڑی دوا بچ جانا عام بات ہے؟

جی ہاں۔ تھوڑی سی دوا ہر بار بچ جاتی ہے۔ ہر علاج کے بعد اسے انڈیل دیں، اور اسے سنبھال کر نہ رکھیں۔

کیا چارج ہوتے وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں؟

نہیں۔ پہلے اسے چارج کریں، پھر علاج کریں۔ بڑوں کا ماڈل چارجنگ کے لیے تار لگی ہو تو نہیں چلتا۔

پرزے کب بدلنے چاہئیں؟

اگر ماسک میں دراڑ آ جائے، وہ سخت ہو جائے، یا چہرے پر اچھی طرح نہ بیٹھے، تو اسے بدل دیں۔ اگر صفائی کے بعد بھی کپ سے پھوار نہ نکلے، تو کپ بدل دیں۔ نئے ماسک اور ماؤتھ پیس کے لیے ہمیں فون کریں۔

حفاظت سب سے پہلے

- صرف وہی دوا اور خوراک استعمال کریں جو آپ کے ڈاکٹر نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ خوراک بدلیں، اور نہ یہ بدلیں کہ آپ اسے کتنی بار استعمال کرتے ہیں۔
- پورے علاج کے دوران بچوں کے پاس رہیں۔ جب نیپولائزر استعمال میں نہ ہو، تو چھوٹے پرزے اور تاریں بچوں سے دور رکھیں۔
- ہر شخص کا اپنا ماسک یا ماؤتھ پیس ہونا چاہیے۔ انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔
- ہر علاج کے بعد کپ میں بچی ہوئی دوا انڈیل دیں۔ اسے اگلی بار کے لیے نہ رکھیں۔
- اگر علاج کے بعد سانس بہتر نہ ہو، یا اور خراب ہو جائے، تو اپنے ڈاکٹر کو فون کریں۔ ایمرجنسی میں 911 پر فون کریں۔
- اسے آگ پکڑنے والی یا بے ہوش کرنے والی گیسوں کے قریب استعمال نہ کریں۔
- یہ لائف سپورٹ (زندگی بچانے والی مشین) کے طور پر استعمال کے لیے نہیں ہے۔ یہ کسی بے ہوش شخص کے لیے، یا جو خود سانس نہ لے رہا ہو، اس کے لیے بھی نہیں ہے۔

آپ کے نیبولائزر کے بارے میں

پورٹیبل الٹراسونک نیبولائزر

خودکار صفائی

اس میں صفائی کی سیٹنگ پہلے سے موجود ہے۔ یہ استعمال کے بعد مشین کو صاف کر دیتی ہے، تاکہ نیبولائزر اگلے علاج کے لیے تیار رہے۔

تین اسپیڈ

یہ خوبی کم ہی پورٹیبل نیبولائزروں میں ملتی ہے۔ تین اسپیڈ کی مدد سے علاج کو مریض اور دوا کے مطابق رکھا جا سکتا ہے۔

ساتھ لے جانے میں آسان اور ہلکا

یہ اتنا چھوٹا ہے کہ بیگ یا جیب میں آ جاتا ہے۔ اس طرح علاج ہر وقت آپ کی پہنچ میں رہتا ہے۔

صرف ایک بٹن سے چلتا ہے

بچوں اور بڑوں، دونوں کے لیے چلانا آسان ہے۔ ملک بھر کے کلینک پہلے ہی اس پر بھروسا کرتے ہیں۔

دیر تک چلنے والی لیٹھیم بیٹری

15 منٹ چارج کرنے پر دو گھنٹے تک مسلسل استعمال، تقریباً فون کو تھوڑا سا چارج کرنے جیسا۔

بہت کم آواز

اس کی آواز اتنی کم ہے کہ آپ اسے اسکول میں، کام پر، یا سوتے ہوئے بچے کے پاس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

بنانے والا: (USBL) US Brace & Limb Co.

ہم مدد کے لیے حاضر ہیں

ابھی بھی کوئی سوال ہے؟ ہمیں فون کریں۔

ہمارے اوقات: پیر سے جمعہ، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک (نیو یارک کے وقت کے مطابق)۔ تبدیلی کے پرزے بھی ملتے ہیں: دو سائز کے ماسک، ماؤتھ پیس، نلکیاں، اور ہمارے دیے ہوئے نیبولائزروں کے لیے فلٹر۔ ہمیں فون کر کے اپنا نام اور مطلوبہ چیز بتائیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کی انشورنس اسے کور کرتی ہے یا نہیں، اور چیز آپ کو بھیج دیں گے۔ ہمارے اوقات کے بعد، دوا کے بارے میں سوالات کے لیے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو فون کریں۔ سانس لینے میں مشکل ہو، تو 911 پر فون کریں۔

یہ گائیڈ آن لائن: wellness-supplies.com/how-to-use/ultrasonic/ur